

**Directives d'utilisation**  
**Pr LUPRON DEPOT®**  
**Acétate de leuprolide pour suspension à effet prolongé**

Seringue à double compartiment préremplie

3,75 mg (libération prolongée sur 1 mois)

7,5 mg (libération prolongée sur 1 mois)

11,25 mg (libération prolongée sur 3 mois)

22,5 mg (libération prolongée sur 3 mois)

30 mg (libération prolongée sur 4 mois)

Avec solvant stérile


LUPRON DEPOT doit être administré sous la supervision d'un professionnel de la santé. Les microsphères lyophilisées que renferme le compartiment supérieur (près de l'aiguille) de la seringue à double compartiment préremplie doivent être reconstituées et administrées en une seule injection intramusculaire comme suit : 3,75 et 7,5 mg : 1 fois par mois; 11,25 et 22,5 mg : 1 fois tous les 3 mois; 30 mg : 1 fois tous les 4 mois. En raison de différences dans la libération du produit, une dose fractionnée de la préparation à libération prolongée sur 3 ou 4 mois n'est pas équivalente à une même dose d'une préparation à libération prolongée sur 1 mois et ne doit donc pas être administrée.

La poudre de LUPRON DEPOT doit être inspectée visuellement, et la seringue ne doit pas être utilisée si les microsphères s'agglutinent ou forment une masse compacte. Une fine couche de poudre sur la paroi de la seringue est cependant normale. Le solvant doit être limpide.

**Suivez les étapes ci-dessous chaque fois que vous utilisez LUPRON DEPOT.**

**Préparation de l'injection**

**ÉTAPE 1**

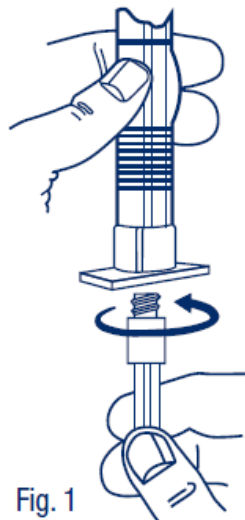

- Pour préparer l'injection, vissez le piston blanc sur le disque de caoutchouc à l'extrémité de la seringue, jusqu'à ce que le disque commence à tourner (fig. 1).
- Veillez à bien resserrer l'aiguille en tournant la gaine de l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Ne serrez pas trop.

**ÉTAPE 2**

Tenez la seringue en position verticale et faites passer le solvant dans le compartiment se trouvant près de l'aiguille en **poussant lentement** (de 6 à

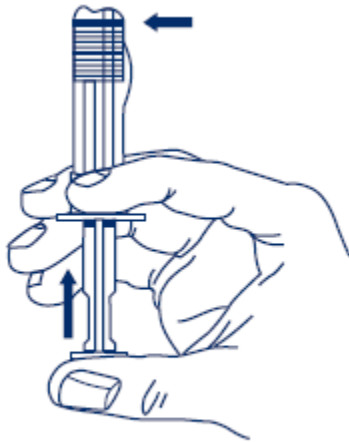


Fig. 2

8 secondes) le piston jusqu'à ce que le premier disque se trouve vis-à-vis de la **ligne bleue** au milieu du corps de la seringue (fig. 2).

**ÉTAPE 3**

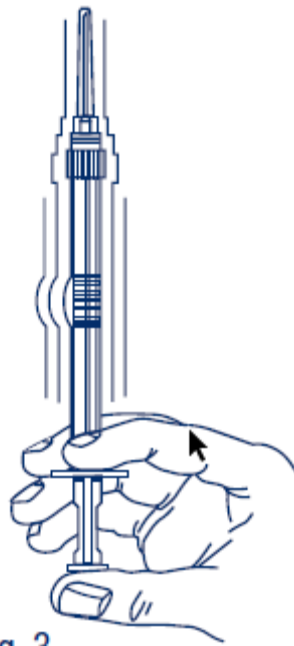


Fig. 3


- Maintenez la seringue en position verticale. Agitez doucement la seringue pour bien mélanger les microsphères (poudre) et obtenir une suspension homogène (fig. 3).
- La suspension aura une consistance laiteuse. Si les microsphères adhèrent au disque ou s'agglutinent, tapotez la seringue avec votre doigt pour disperser les microsphères.
- N'utilisez pas la seringue si une partie de la poudre n'est pas entrée en suspension.

**ÉTAPE 4**


- Maintenez la seringue en position verticale.
- De l'autre main, enlevez la gaine de l'aiguille sans la tourner et poussez le piston pour expulser l'air de la seringue.

**ÉTAPE 5**

- Après la reconstitution, injectez tout le contenu de la seringue par voie intramusculaire en enfonçant l'aiguille à un angle de 90 degrés dans la région fessière, la face

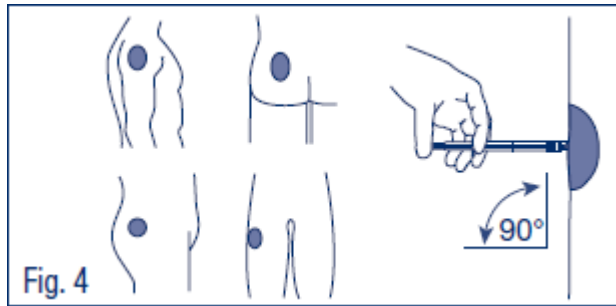


antérieure de la cuisse ou le muscle deltoïde; il faut alterner les points d'injection (fig. 4). La suspension se dépose très rapidement après la reconstitution; **on doit donc administrer LUPRON DEPOT immédiatement après l'avoir reconstitué.**

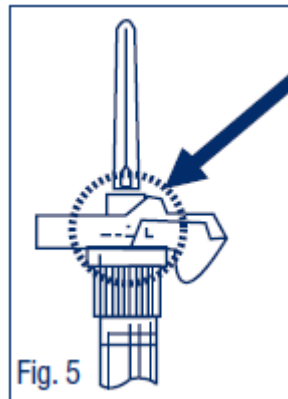

**Remarque :** Si vous percez accidentellement un vaisseau sanguin et que du sang était aspiré, vous pourriez le voir juste sous le raccord luer, à travers le dispositif de sécurité LuproLoc<sup>®</sup> transparent (fig. 5). Si vous notez la présence de sang, retirez immédiatement l'aiguille de la peau et n'injectez pas le médicament.

#### ÉTAPE 6

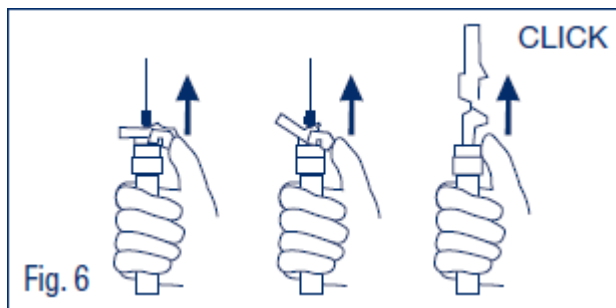

- Après l'injection, retirez l'aiguille de la peau, puis poussez **immédiatement** vers l'avant la flèche du dispositif de sécurité LuproLoc jusqu'à ce que le dispositif soit entièrement déployé, et que vous entendiez un CLIC (fig. 6).

Bien que la suspension soit stable pendant 24 heures suivant la reconstitution, il faut la jeter si elle n'est pas administrée immédiatement après la reconstitution, étant donné qu'elle ne renferme aucun agent de conservation.

Comme c'est le cas pour tout médicament administré par injection, on doit changer périodiquement de point d'injection.

Jetez les seringues conformément à la réglementation/procédure locale.

#### Besoin d'aide?

Veuillez composer le 1-888-704-8271 :

- si vous avez des questions au sujet du médicament ou de la marche à suivre;
- si la seringue se brise ou devient inutilisable pour quelque raison que ce soit et que vous deviez la remplacer.

Ce document a été préparé par Corporation AbbVie.

Dernière révision : 23 novembre 2020